

HIFUⁱShape™

Precise Lifting & Tightening System



HIFU (Zaostrený ultrazvuk o vysokej intenzite)

Neinvazívny systém pre natiahnutie kože a tvarovanie kontúr



SYKOR™
YOUTHFUL SKIN SCIENCE

Problém

4 činitele spôsobujúce ochabovanie kože a tvorbu vrások



Degenerácia
kolagénu a
elastických
vlákien

Bohatá mimika
tváre

Redukcia
vrstiev
kožného tuku

Ochabnutie SMAS
a väziva spôsobuje
ochabnutie
svalstva

HIFUiShape™
Precise Lifting & Tightening System





Vek 35





Vek 45



Vek 50

STÁRNUTIE KOŽE

- Hlavným dôsledkom starnutia kože tváre sú zmeny v povrchovom systéme blanitých svalových úponov (SMAS).
- SMAS sa nachádza v hlbokých vrstvách kože. Jedná sa o sústavu svalov, aponeurózy a tuku.
- Zhoršovanie stavu SMAS spôsobuje ochabovanie kože a vrásky.

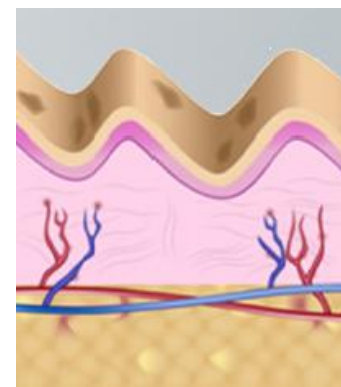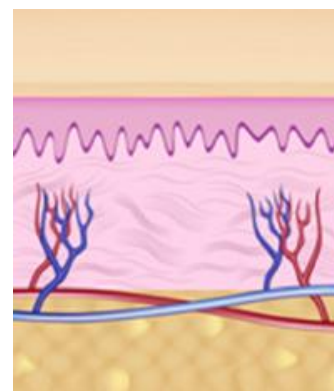

Riešenie -

HIFU iShape


Neinvazívny systém pre natiahnutie kože a tvarovanie kontúr

- **Využitie akustických vln o vysokej intenzite k stimulácii kožných vrstiev škáry a aponeurózy**
- **Ultrazvuk o vysokej intenzite preniká priamo do hĺbky kože tváre a do vrstvy telesného tuku; vytvára nepretržite zahrievaný tepelný bod.**
- **V bode tepelného zrážania, ktorého je dosiahnuté pri 60 - 80 ° C, dochádza k vyvolaniu prestavby kolagénu a k preusporiadaniu kolagénových spojov.**
- **Rôzne vrstvy kože sú selektívne zahrievané (napr. Tuková vrstva (13 mm), SMAS (4.5 mm), spodná zamša (3 mm), vrchná zamša (1.5 mm)), bez toho aby došlo k poškodeniu kožných buniek a ďalších buniek okolitých zdravých orgánov .**

Mechanizmus



Single-shot

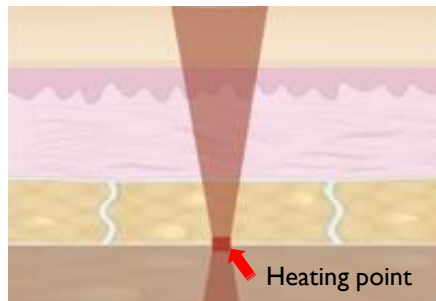

Multi-shot



Pokožka

Škára

Zahrievaný
bod **SMAS**

Svaly

- Ultrazvuková energia sa zameriava na nízkoúrovňovú manipuláciu buniek v prirodzenom prostredí
- Bod tepelného ohrevu dosiahol 60 - 80 stupňov Celzia.
- Selektívne zahrievanie rôznych vrstiev kože, napr. Tukové vrstvy (13mm), vrstvy SMAS (4.5 mm), spodné škára (3 mm), vrchné škára (1.5 mm)
- Termálne zahrievanie a efekty ultrazvukové kavitácie vyvolávajú prestavbu kolagénu a preusporiadanie kolagenových spojov.

Indikácie HIFU iShape

- Priamy efekt na hĺbkové väzivo a vylepšení stavu väziva
- Opätovné usporiadanie a obnova kolagénu
- Zmenšenie veľkých pórov
- Zlepšenie stavu vrások
- Zlepšenie pružnosti kože
- Napínanie a vytiahnutie
- Odbúravanie tuku



Blahodárne účinky -

HIFU iShape™
Precise Lifting & Tightening System




- Okamžitý účinok hneď po prvom ošetrení
- Trvalé výsledky
- Žiadne prestoje
- Žiadne poranenia
- Precízna liečba
- Nepoškodzuje okolité tkanivá



THERMAGE

LASER

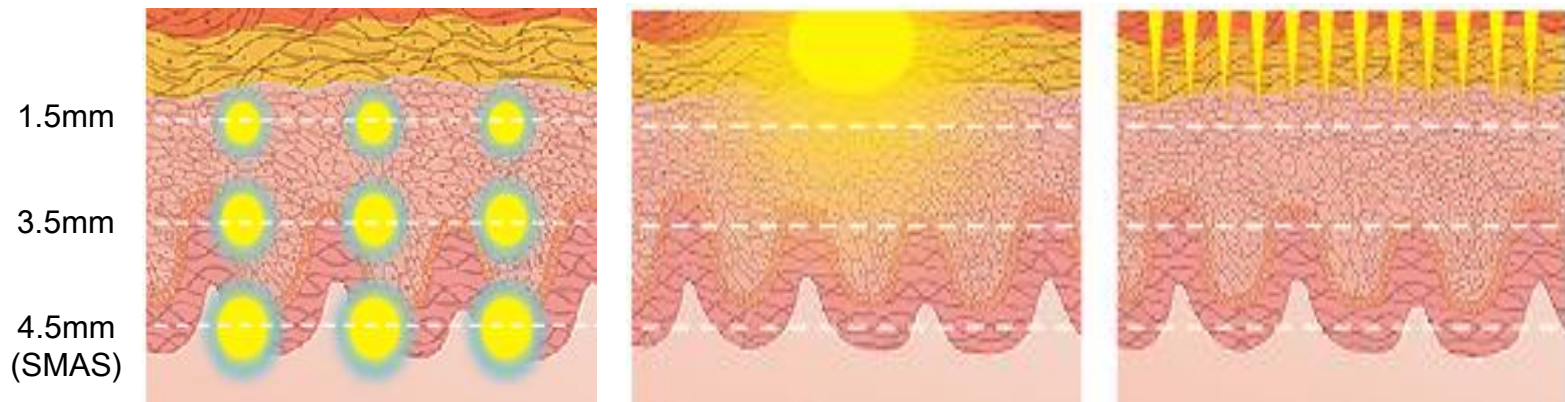

↑

Energia je s veľkou presnosťou prenášaná do cieľových bodov bez poškodenia povrchu kože

↓

Energia postupne preniká od povrchu kože do cieľových vrstiev

		THERMAGE
Cílová hloubka	pokožka, škára, vazivo SMAS, tuková vrstva	Škára
Hloubka	1.5mm/3.0mm/4.5mm/13mm	2.4mm
Teplota	60 ~ 80°C	40 ~ 55°C
Ošetření	Neinvazivní zaostřená ultrazvuková vlna o vysoké intenzitě ovlivňuje vrstvu SMAS (systém svalových úponů) a výsledkem jejího použití je vytažení, napínání a tvarování kontur.	Neinvazivní radiofrekvenční energie způsobuje v kůži termální efekt, v jehož důsledku dochází k přestavbě kolagenu a následnému napnutí kůže.
Bolestivost	* *	* * * * *
Trvanlivost	1~3 roky	1~2 roky

Príručné nadstavce a ich funkcie

	Single-shot 	Multi-shot 
Použiteľné kazety	3mm/4.5mm	1.5mm/3.0mm/4.5mm/13mm
Použite na	Okraje, konvexné a konkávne povrchy	Ploché povrchy
Efekt	• Vytiahnutie kože a jej napínanie • Vylepšenia stavu pórov, jemných rýh a sfarbenie kože • Zlepšenie pružnosti	• Vytiahnutie kože a jej napínanie • Vylepšenia stavu pórov, jemných rýh a sfarbenie kože • Zlepšenie pružnosti • Zoštíhľovania postavy (paže, brucho, stehná, atď.)
Množstvo energie (J)	Tvár: 0.1 – 1.5	Tvár: 0.1 – 1.5/Tělo: 0.1 – 3.0

Klinické výsledky



Před ošetřením



Po ošetření



Klinické výsledky



Před ošetřením



Po ošetření



Klinické výsledky



Před ošetřením



Po ošetření



Klinické výsledky



Před ošetřením



Po ošetření



Klinické výsledky




Před ošetřením




Po ošetření



Klinické výsledky

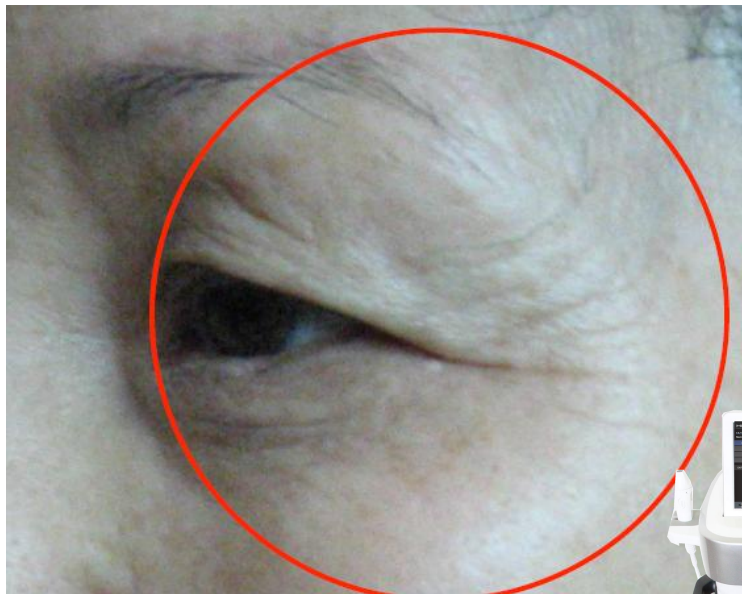

Před ošetřením

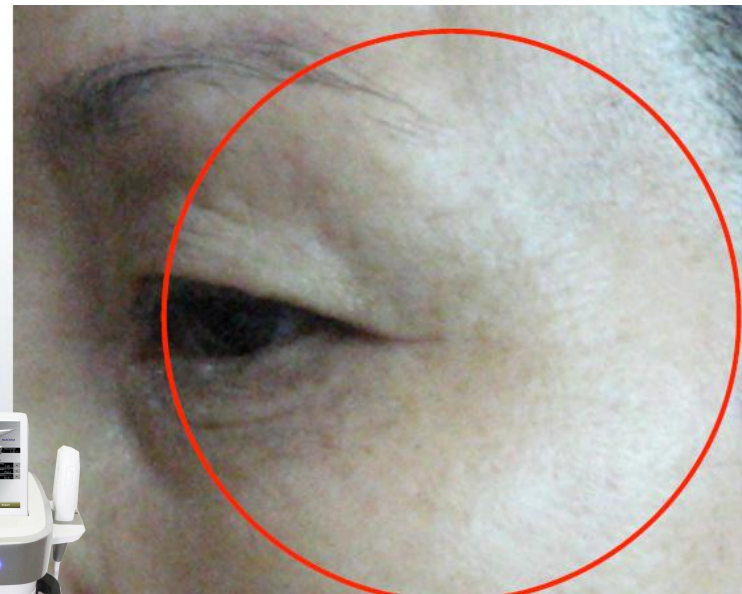

Po ošetření



Klinické výsledky



Před ošetřením



Po ošetření



Klinické výsledky



Před ošetřením



Po ošetření



Klinické výsledky



Před ošetřením



Po ošetření



Otázky a odpovede

1. Za ako dlho po ošetrení sa dostavia viditeľné výsledky?

Okamžité efekty vytiahnutie kože zaznamenáte hneď po prvom ošetrení. Kolagén sa obnoví a kolagénové spoje sa preusporiadajú do 2 až 3 dní. Najlepšie výsledky sa dostavia pri ošetrení vykonávanom raz týždenne po dobu jedného mesiaca (teda 4 týždňov).

2. Ako dlho trvá jedno ošetrenie?

Dĺžka ošetrenia je rôzna - závisí na ošetrovaných častiach tela a počtu ošetrovaných miest. Ošetrenie celej tváre normálne trvá okolo 30 minút.

3. Je ošetrenie bolestivé?

Dostaví sa ľahké mravčenie a pocit tepla.

4. Aký trvanlivý je efekt ošetrenia?

Klinické testy preukázali, že účinky pretrvávajú približne 1 rok.

5. Na čo je potrebné dať pozor pri ošetrení?

V deň Vášho ošetrení neumývajte svoj tvár po zvyšok dňa studenou vodou. V prvom týždni po ošetrení sa neodporúča návšteva sauny a konzumácia alkoholu.

HIFU iShape™

Precise Lifting & Tightening System

Ďakujeme

www.eago-slovakia.sk
info@eago-slovakia.sk
tel: +421 (0)944571914

